

HDF en línea


Mejorar la calidad de vida de los pacientes de diálisis a largo plazo

CCL-6000

Actualmente HDF en línea(Hemodiafiltración en línea) es modo de tratamiento que está más cerca del metabolismo renal normal, según los estudios observacionales, **la tasa de mortalidad por todas las causas se reduce en aproximadamente un tercio en comparación con la HD normal**, lo que mejora la calidad de vida de los pacientes y la supervivencia del paciente.

Sistema de tratamiento de HDF en línea, puede generar en línea fluidos de reemplazo estériles de alta calidad ...

- Eliminar más ampliamente de moléculas de toxinas grandes, medianas y pequeñas.
- Hemodinámica más estable.
- Mejorar el estado microinflamatorio.
- Mejorar la nutrición del paciente.
- Mejorar la supervivencia del paciente y reducir el daño cardiovascular.
- Mejorar la respuesta de eritropoyetina.

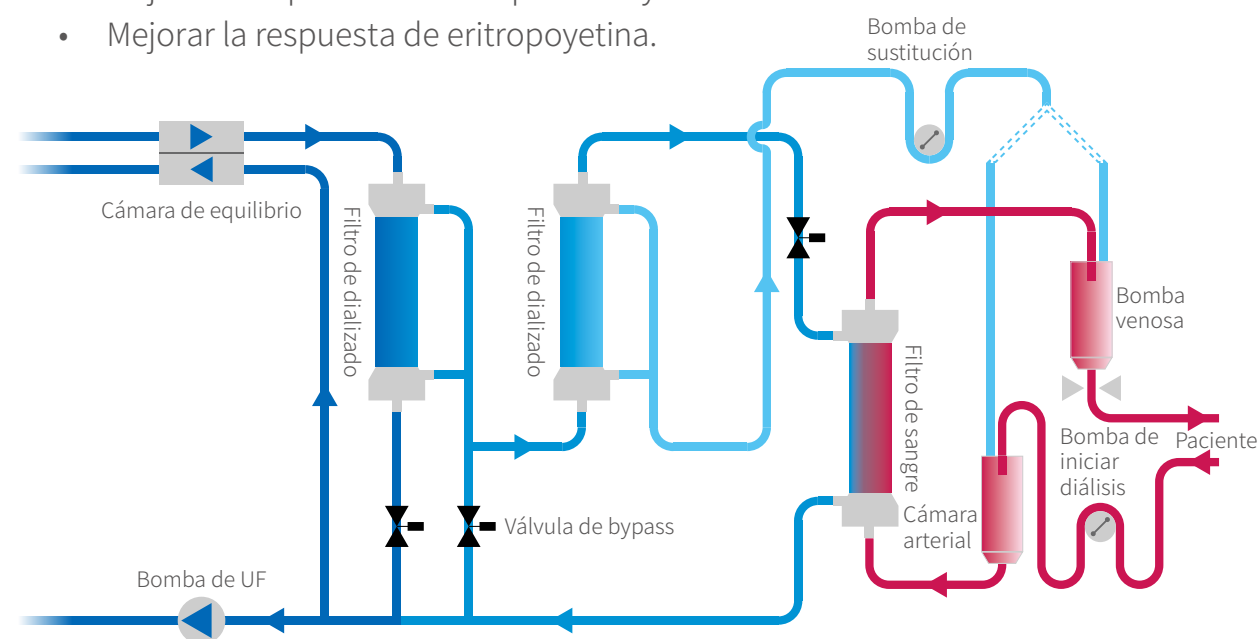

Servicio técnico profesional

- Servicio técnico profesional: El equipo de servicio técnico profesional de primera clase puede responder a las necesidades del hospital a tiempo, resolver diversos problemas clínicos en 24 horas, para garantizar el uso seguro del equipo.
- Capacitación regular gratuita: brindamos servicios de capacitación para los departamentos pertinentes del hospital y el personal médico para mejorar la sensibilidad y la capacidad de respuesta de emergencia de la operación del equipo.



China Care Medical Equipment Co.,Ltd
Adress: Room C208, Changsheng Business Building, Daguan South Road No 26 ,
Tianhe,Guangzhou, China.
Contact Person: (Joseph)
Cellphone/WhatsApp : +86 13926480041



CCL-6000

HDF en línea

Equipo de hemodiálisis



Máquina de nueva generación

Mantener la diálisis segura

Deja el servicio servir para usted

Programa de apoyo al tratamiento clínico



Seguridad del tratamiento garantizada

- El diseño integrado del detector de aire, la pinza venosa y el reconocimiento de sangre que adoptan el sensor ultrasónico y óptico, y pueden controlar la pequeña burbuja y la sangre.
- * Detector de presión arterial no invasivo en línea: Vigilar la presión arterial y frecuencia cardíaca, comunicar con la máquina en tiempo real, garantizar seguridad de tratamiento.
- Sistema de control de realimentación de volumen de balance avanzado que puede garantizar la precisión de UF .
- El sistema de control de realimentación de mezcla de dializado que puede garantizar la precisión del ion de dializado.

Auto-test seguro

- Control independiente de los sistemas hidráulicos, de circuito de sangre y de detección para garantizar la seguridad del tratamiento.
- Más de 10 programa obligatorios de autoprueba: Sistema de equilibrio, sistema de mezcla de fluidos, sistema de UF, sistema de circuito de sangre...
- Equilibre el sistema de detección de fugas en tiempo real para garantizar UF preciosa.

Ahorra de costo

- Concentrado de suministro central: es adecuado para el control centralizado en centros grandes de diálisis, eliminando la manipulación manual, eliminando la contaminación secundaria de concentrados, alta eficiencia en el manejo y calidad confiable.
- Enjuague y reinfusión en línea;usar el sustitución producido en línea para enjuague y reinfusión, no necesita bibag de salino, operar automáticamente.

Diseño de operación inteligente


- El diseño guiado, la autoprueba, el ajuste de parámetros, el tratamiento, la limpieza y la desinfección fáciles de usar de una variedad de operaciones.
- Gestión de autoridad de niveles múltiples: establecer diferentes permisos para los médicos, enfermeras e ingenieros para garantizar que la máquina funcione correctamente y garantizar la seguridad del tratamiento.
- La pantalla giratoria se puede girar alrededor, con un gran campo de visión y elementos de bandeja fáciles de tomar.

Diseño de fácil mantenimiento

- El diseño de autobloqueo del panel frontal, que es fácil de abrir y ahorrar tiempo.
- El otro panel adopta perillas y tornillos, que se pueden desmontar fácilmente sin instrumentos.
- El módulo electrónico con diseño de estilo de tarjeta, que es fácil de desmontar y hacer mantenimiento.
- El diseño magnético de contra-apertura facilita el reemplazo de los filtros de doble endotoxina.


Actualización multifunción

- Compatible con todas las marcas de consumibles para hemodiálisis, una variedad de fórmula de dializado + fórmula personalizada, para adaptarse a cada marca de concentrado y desinfectante.
- Bomba de heparina multifuncional: identificación automática del modelo de jeringa (para jeringa de 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml), curva de heparina de apoyo.

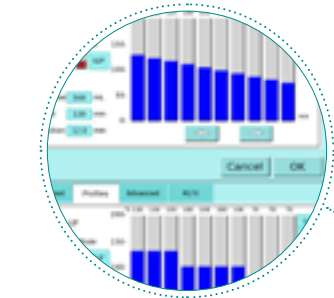


Perfiles multi-tratamiento, brinda un tratamiento personalizado

- Varios perfiles de sodio
- Perfil de tasa de UF
- Perfil de carbonato
- Perfil de tratamiento de flujo de heparina
- Perfil de tratamiento de flujo de dializado
- Perfil de temperatura de dializado

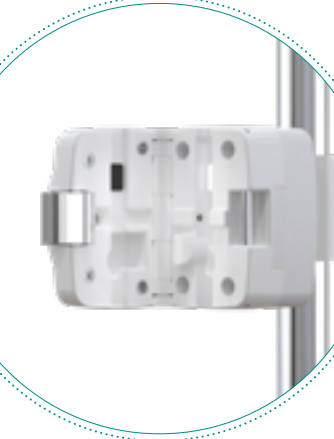

* Monitor de volumen de sangre

- Los cambios en el volumen de sangre pueden detectarse con precisión durante el tratamiento, lo que evita eficazmente la hipotensión causada por la eliminación excesiva de agua (opcional).

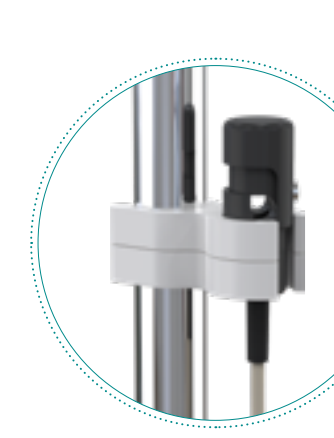

* Minitor de tasa de aclaramiento en tiempo real

- Minitor en tiempo real del efecto de aclaramiento de urea para asegurar la adecuación del tratamiento del paciente.



* Cartucho de bicarbonato(opcional)

- Aislamiento de contaminación microbiana de concentración B para garantizar la pureza del dializado y mejorar la calidad del tratamiento.

Nota: * significa el módulo opcional