

Spécifications techniques

Spécifications physiques et environnementales

Dimensions(H×L×P)	1356×620×849mm
Poids	110kg (Basic unit)
Température de stockage	-20~55 °C
Température de fonctionnement	10~40°C
Humidité de stockage	≤93%

Spécifications électriques

Alimentation:	CA 100- 240 V, 50/60 Hz
Batterie:	CC 24 V, minimum 120 min
Prises électriques:	3

Spécifications pneumatiques

Alimentation en gaz	0.28~0.6MPa
Débitmètres	O ₂ : 0~1L/min; 1~10L/min
(configuration de base)	N ₂ O: 0~1 L/min; 1~10L/min
• Flowmeters(Full config):	O ₂ : 0~1L/min; 1~10L/min
	N ₂ O: 0~1 L/min; 1~12L/min
	Air: 0~1 L/min; 1~15L/min

•Système gazeux	Alarme de défaillance de l'alimentation en oxygène Protection contre défaillance de l'alimentation en oxygène
•Modes de fonctionnement	Rinçage oxygène: 25- 75 L/min Fermé, semi- fermé, semi- ouvert
mode d'entraînement	Entraînement pneumatique et commande électronique.

Soupape de sécurité ≤10kPa

• Modes opératoires: Manuel / Ventilé

• Supports de bouteilles: Optionnel (O₂, N₂O)

Spécifications du ventilateur

Types de patients : Adulte, pédiatrie

Modes de ventilation (configuration de base).

IPPV, PCV, SIMV- VC, Manuel,

PS/CPAP (avec sauvegarde contre l'apnée), Veille

Modes de ventilation (configuration complète) :

IPPV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC, Manuel,

PS/CPAP (avec sauvegarde contre l'apnée), Veille

Réglage Bouton Navigator et écran tactile

Volume courant 20~1500ml

Fréquence de ventilation 2~100bpm

Rapport 4:1~1:8

PEP électronique ARRÊT, 3- 30 cmH₂O

• Plateau inspiratoire OFF, 5~60%

• Déclenchement par débit 1~15L/min

Plage de pression 5~70cmH₂O

Support de pression 3~50cmH₂O

Surveillance de ventilation Pression: Ppic, Pplateau, Pmoy, PEP

Paramètres volumiques MV, Vt

Fréquence respiratoire

Compliance, etc

• Gas Monitoring: O₂, CO₂, Agent (All optional)

• Affichage graphique (configuration de base): courbes P-t, F-t, V-t

Affichage graphique (configuration complète) courbes P- t, F- t, V- t,
boucles P- V et F- V

• Alarme: Pression des voies aériennes haute/basse

Volume minute haute/basse

FiO₂ haute/basse (lorsque la fonction FiO₂ est activée)

Panne d'alimentation, panne d'alimentation en O₂, apnée, etc

Vaporisateur

Prend en charge 2 vaporisateurs (Selectatec® avec verrouillage mutuel)

• Support optionnel pour 3 vaporisateur

Types d'agents : Halothane, Enflurane, Isoflurane, Sévoflurane

• Types de remplissage : Pour- fill, Key- fill, Quik- fill®

Remarque: Les configurations ci-dessus incluent les équipements standard et optionnels. Veuillez confirmer le prix auprès de votre représentant commercial Aeonmed.



Machine d'anesthésie

CE 0123




China Care Medical Equipment Co.,Ltd
Adress:Room B101, Zhongbang Business Building, PuXing
Road No. 87, Tianhe, Guangzhou,
Chinaweb:www.chinacaremedical.com



Fiable et entièrement fonctionnel

- Technologie issue de 21 ans de spécialisation sur les machines d'anesthésie
- Convient aux patients pédiatriques comme aux adultes : débit de volume courant pouvant descendre jusqu'à 20ml en ventilation à contrôle de volume
- Modes de ventilation complets assurant une flexibilité pour les différentes phases anesthésiques?: PCV, IPPV, SIMV , VC, SIMV , PC, PS/CPAP
- Multiples modules optionnels: AGSS, Suction, AGM, EtCO2

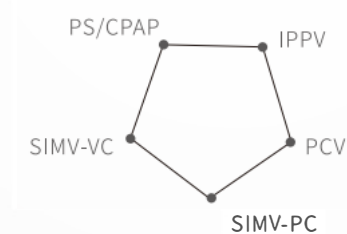

Design durable et sans consommable

- Le matériau en alliage rend le système respiratoire robuste, résistant à la corrosion et facile à nettoyer et à entretenir.
- Le capteur de débit intégré sans consommable réduit les coûts de maintenance.
- La valve APL en alliage avec fonction de libération rapide simplifie la ventilation manuelle et améliore l'efficacité de l'anesthésie.
- Le commutateur une touche vers le mode ACGO offre davantage de solutions de ventilation pour différents types de patients.

Précis

- Le débitmètre mécanique à double tube pour chaque gaz permet d'administrer avec précision une anesthésie à faible et très faible débit.
- La conception anti-manque d'oxygène garantit une concentration en oxygène du gaz inhalé supérieure à 21%, réduisant efficacement le risque d'hypoxémie.
- Le bouclier renforcé du bouton protège le débitmètre contre les dommages et assure un fonctionnement sûr et stable.



Excellente suivi de ventilation

- Basculement une touche de la ventilation manuelle à la ventilation mécanique
- Écran tactile couleur 8,4" avec bouton de navigation, facile à utiliser
- Un suivi complet garantit la sécurité du patient



Modules optionnels de surveillance O2, CO2 et agent anesthésique



Boucles et courbes de spirométrie pour le suivi continu de l'état ventilatoire